



# 開催の流れ

---

(Ver.1.2)

(2023/11/8 更新)



# 目次


---

- 1) [開催の流れ ～例:インストラクターと訓練受講者が同室～](#)
- 2) [開催に必要なもの](#)
- 3) [開催準備](#)
  - ・[開催の予約](#)
  - ・[デバイスの準備](#)
  - ・[「コントローラーURL」、「モニターURL」の配付](#)
  - ・[インストラクターに利用方法について説明](#)
- 4) [開催実施](#)

# 1) 開催の流れ～例：インストラクターと訓練受講者が同一～

「救トレクラウド」を使ったトレーニング開催の流れをご紹介します。ここで例としますのはインストラクターと訓練受講者が同室にいるケースです。インストラクターはトレーニングの様子を確認しながら、タブレットPCの「コントローラー」画面でトレーニングのシナリオを進めています。トレーニング受講者は大型ディスプレイに映ってるバイタルサインの「モニター」画面を目や耳で確認しながら、訓練を進めています。

以下は、この例における開催のイメージ図です。

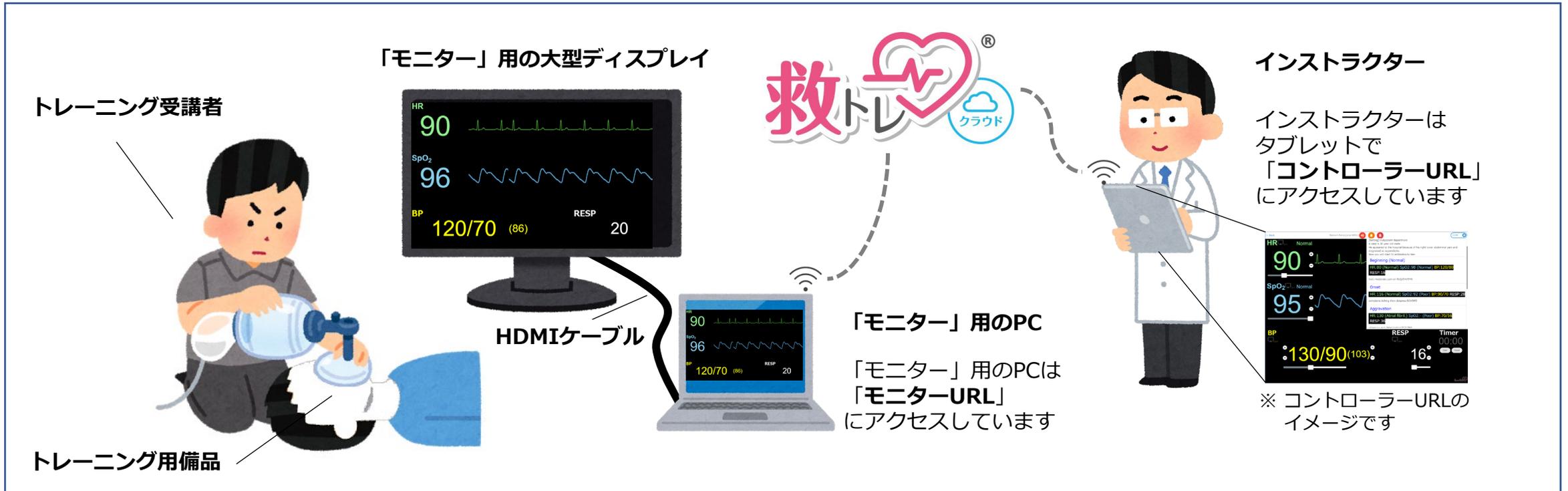

## 2) 開催に必要なもの

---

### 1) 有効な「救トレ クラウド」のアカウント

→ アカウントの登録、マイページの使用方法については「[クイックスタートガイド](#)」をご参照ください

### 2) 開催トレーニング用のチケット

→ 開催ブース数および開催日数に必要な枚数を準備してください

### 3) 「コントローラー」用のデバイス

→ この例ではタブレットPCを利用します。パソコンやスマートフォンでも操作可能です。

### 4) 「モニター」用のデバイス

→ この例ではノートPC、大型ディスプレイとそれらを繋ぐHDMIケーブルを使います。タブレットを使うのもアリでしょう。

### 5) 開催場所での安定的なインターネット接続。Wi-Fiを利用して、利用デバイス(PC、タブレット等)をインターネットに接続します (※開催場所において安定的なインターネット接続が難しい場合は、インターネット接続が不要な「救トレ ポータブル」がお勧めです)

### 6) トレーニングで利用する備品、任意のマネキンなど

### 3) 開催の準備（開催の予約）

- 1) 開催の日程が決まりましたら、マイページで開催トレーニングを予約します
- 2) 予約した開催トレーニングの「コントローラーURL」、「モニターURL」を保存します

以下は3ブース同時に開催する場合におけるURL情報の例です。

例:トレーニングブース1

開催名:アナフィラキシー  
開始日時:2021-12-24 8:30:00  
終了日時:2021-12-25 8:30:00  
コントローラーURL:https://c01.emersim.jp/xxxxxxxxxx/  
モニターURL:https://c01.emersim.jp/xxxxxxxxxx/

例:トレーニングブース2

開催名:大量出血  
開始日時:2021-12-24 8:30:00  
終了日時:2021-12-25 8:30:00  
コントローラーURL:https://c01.emersim.jp/xxxxxxxxxx/  
モニターURL:https://c01.emersim.jp/xxxxxxxxxx/

例:トレーニングブース3

開催名:急性呼吸不全  
開始日時:2021-12-24 8:30:00  
終了日時:2021-12-25 8:30:00  
コントローラーURL:https://c01.emersim.jp/xxxxxxxxxx/  
モニターURL:https://c01.emersim.jp/xxxxxxxxxx/

※マイページは開催管理者のみがアクセスするものであり、インストラクターや受講者のアクセスは不要です。

「コントローラーURL」や「モニターURL」にアクセスするために、マイページにログインする必要はありません。

単に左記のURLさえあれば、インターネット接続されているデバイス(パソコン、タブレット、スマートフォン等)からアクセスできます。

開催管理者はインストラクターに「コントローラーURL」と「モニターURL」のみ知らせればよいこととなります。

開催管理者からインストラクターへのお知らせの仕方については、[「開催の準備\(「コントローラーURL」、「モニターURL」の配付\)」](#)として後述します。

### 3) 開催の準備 (デバイス)

#### 開催に必要なデバイスを準備します

##### インストラクター用の「コントローラー」デバイス


- ・ インストラクターが移動しながらトレーニングの様子を確認できるように、移動の妨げにならないタブレットPCを準備します(スマートフォンでも操作可能です)
- ・ タブレットPCの標準ブラウザで「コントローラーURL」にアクセスします



※ 開催前に「コントローラーURL」にアクセスすると、開催時間外のエラーが表示されますが、開催時間になってから、再度アクセスすると正常に表示されます

##### 受講者用の「モニター」デバイス

- ・ 波形モニターが見やすいように大きめのディスプレイを準備します。また、ディスプレイに「モニター」画面を映すために、簡単に移動できるノートPCを用意します。
- ・ ノートPCのブラウザで「モニターURL」にアクセスします

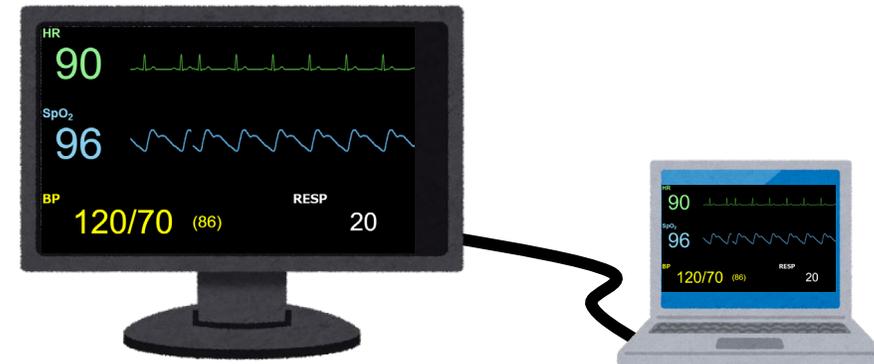

※ 開催前に「モニターURL」にアクセスすると、開催時間外のエラーが表示されますが、開催時間になってから、再度アクセスすると正常に表示されます

### 3) 開催の準備(「コントローラーURL」、「モニターURL」の配付)

「コントローラーURL」と「モニターURL」をインストラクターにメール等でお知らせし、開催時に利用する各デバイスで利用出来るようにしておきます。

#### メール等でのお知らせ

メールなどを利用して「コントローラーURL」と「モニターURL」をお知らせします。開催時はこれらのURLに一般的なブラウザでアクセスしてください。

#### 「コントローラー」用デバイス向けの例文

開催名:アナフィラキシー  
開始日時:2021-12-24 8:30:00  
終了日時:2021-12-25 8:30:00  
コントローラーURL:  
<https://c01.emersim.jp/xxxxxxxxxx/>

#### 「モニター」用デバイス向けの例文

開催名:アナフィラキシー  
開始日時:2021-12-24 8:30:00  
終了日時:2021-12-25 8:30:00  
モニターURL:  
<https://c01.emersim.jp/xxxxxxxxxx/>

※ 開催前に「コントローラーURL」、「モニターURL」にアクセスすると、開催時間外のエラーが表示されますが、開催時間になってから、再度アクセスすると正常に表示されます

**Tips1** : マイページにて開催予約をする画面の「開催トレーニング一覧」の下の方に



というボタンがあります。このボタンを押すことで開催予定のお知らせがコピーされた状態になりますのでメールソフト等で「貼り付け」をすると便利です

**Tips2** : お知らせに際してはメール以外のチャットなど何のツールを使っても問題ありませんが、Facebook Messengerなど一部のツールでは内部的にURLが書き換えられるためにアクセスできないなどのトラブルになりがちです。そういったツールを転送に使わないように御留意下さい。

**Tips3** : URLのお知らせはそのままお知らせしてもよいですし、QRコードへの変換サイト等の利用に慣れていらっしゃる方はQRコードに変換して配付するのもよいでしょう。

### 3) 開催の準備(インストラクターによる利用方法の把握)

---

- 1) インストラクターが初めて「救トレ クラウド」を利用される場合は、  
「[ユーザーマニュアル](#)」の確認をお勧めいたします。  
「コントローラー」の操作方法、「モニター」との連携について理解していただくと、  
開催進行はよりスムーズになります。
- 2) 事前にコントローラーの操作を確認するために、マイページでテスト用の開催を予約し、  
インストラクターが「コントローラーURL」、「モニターURL」にアクセスして試用してみることをお勧めします。  
実際に試すことで、シナリオトレーニングの進め方や「救トレ クラウド」の使い方について理解を深めることができます。

## 4) 開催実施

---

- 1) 「コントローラー」用タブレットで「コントローラーURL」にアクセスできることを確認し、インストラクターにタブレットを提供します
- 2) 「モニター」用ノートPCで「モニターURL」にアクセスできることを確認し、大型ディスプレイと接続し、「モニター」画面が映ってることを確認します
- 3) 「コントローラー」と「モニター」が正常に動作していることを確認します
- 4) インストラクター、受講者、トレーニング用備品がそろいましたら、  
いよいよ開催開始！  
→ [開催のイメージ](#)の通りの開催が可能となります！