



の利用例

(2026年2月19日版)



目次

利用例1)トレーニングでの利用1

(『救トレ ポータブル』とモニタを無線接続)

利用例2)トレーニングでの利用2

(『救トレ ポータブル』からパソコン経由で大画面モニタに表示)

利用例3)トレーニングでの利用3

(『救トレ ポータブル』と大画面モニタを直結)


利用例4)座学時などにモニター画面をプロジェクター表示したい

利用例5)搬送訓練などで利用


(モバイルバッテリー利用)

※有線接続例 Ver.3.0.0以降は有線接続も可能です


利用例1) トレーニングでの利用1 (『救トレ ポータブル』とモニタを無線接続)

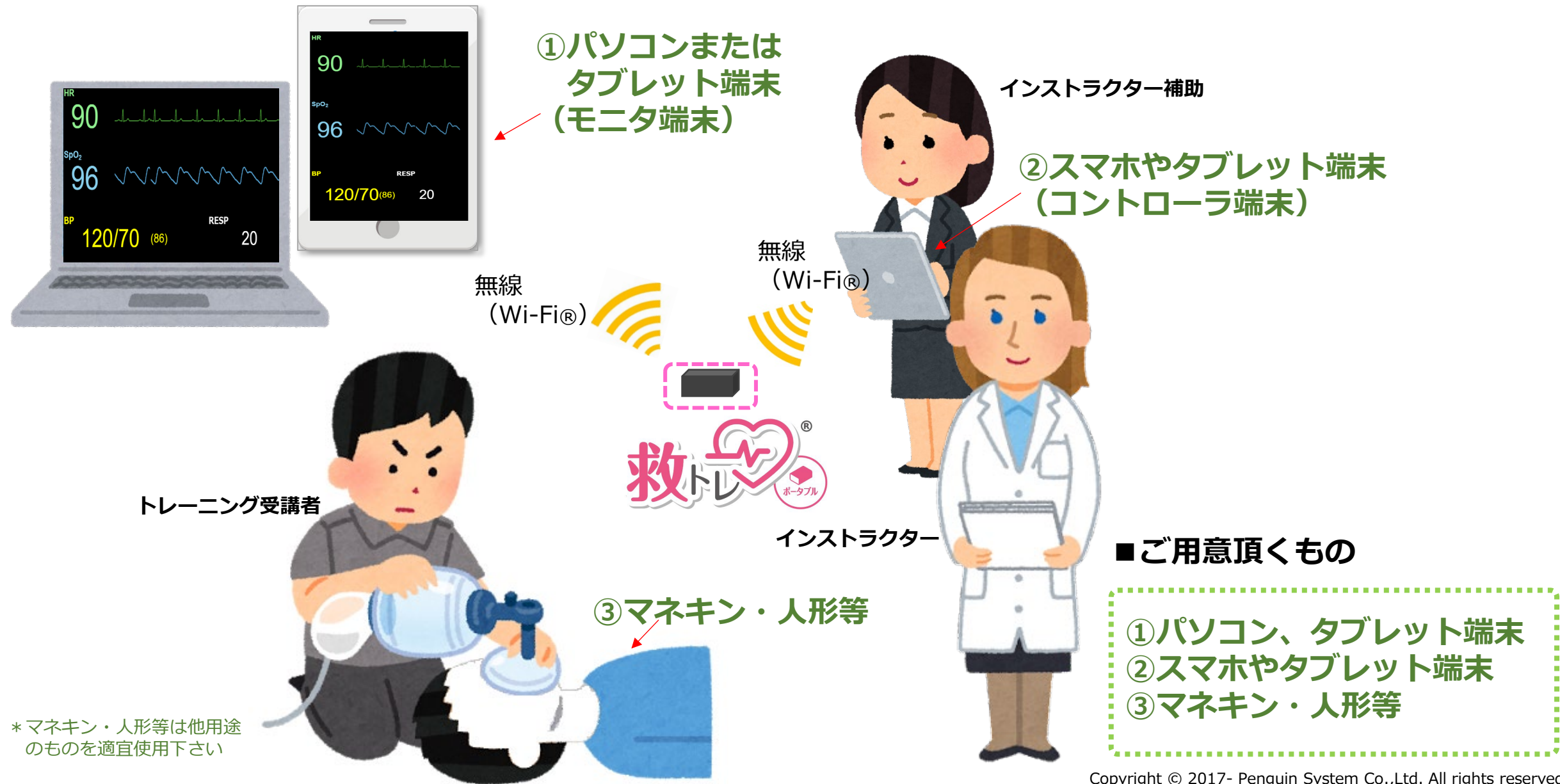

利用例2) トレーニングでの利用2 (『救トレ ポータブル』からパソコン経由で大画面モニタに表示)

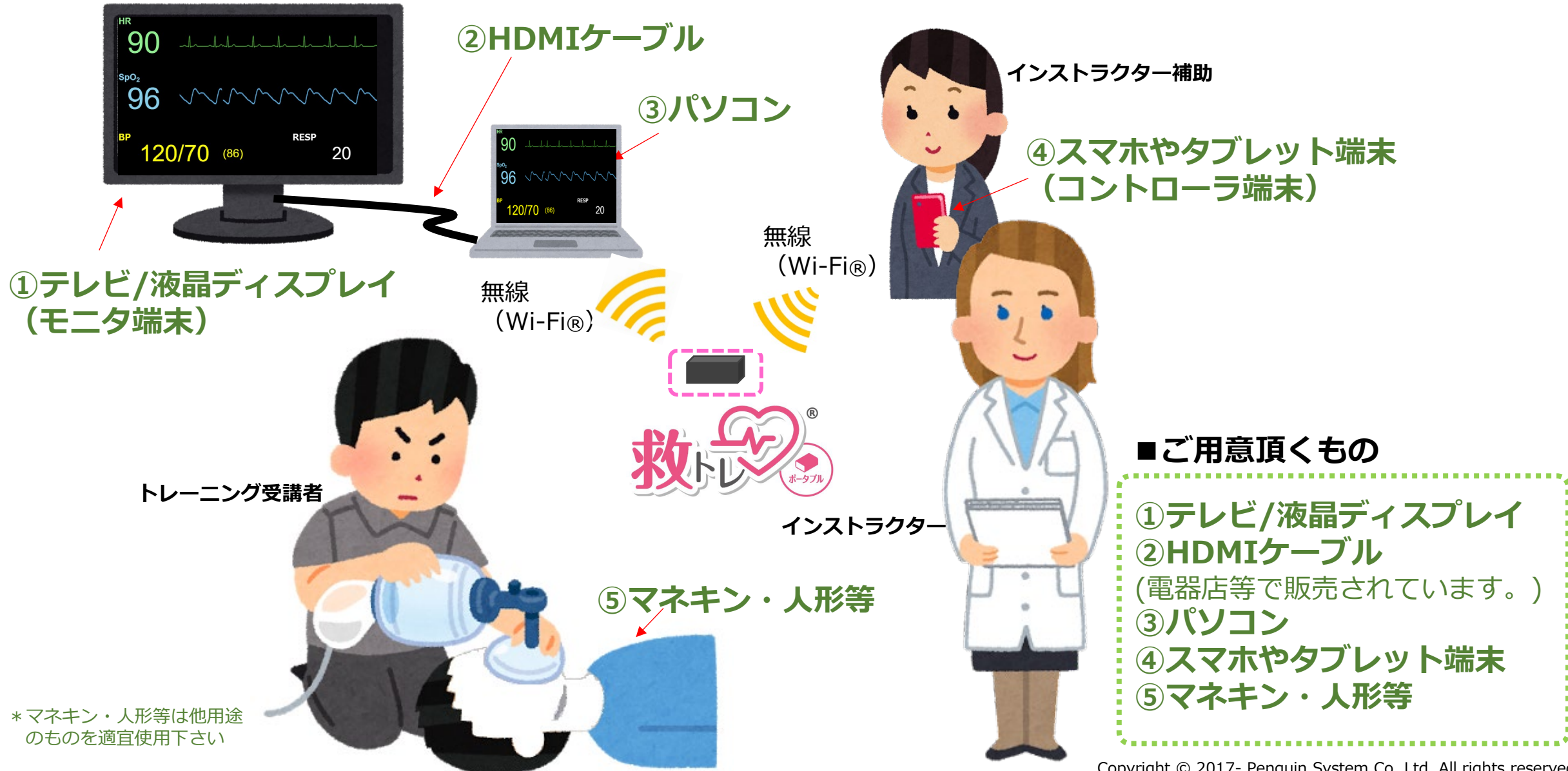

利用例3) トレーニングでの利用3 (『救トレ ポータブル』と大画面モニタを直結)

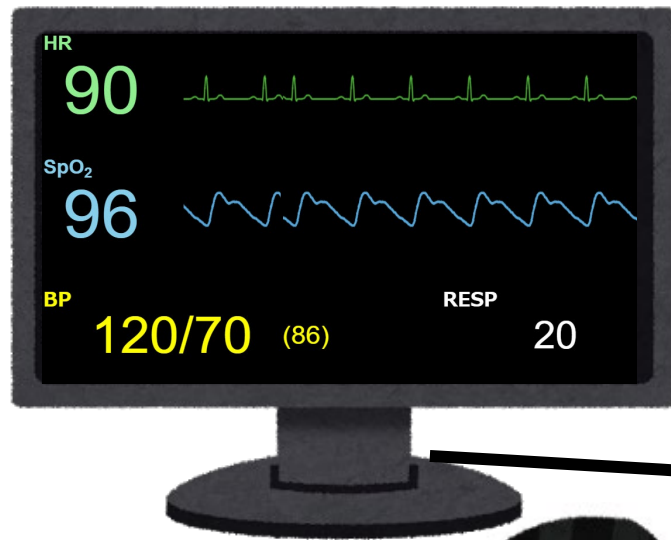

① テレビ/液晶ディスプレイ
(モニタ端末)

② HDMIケーブル 無線 (Wi-Fi®)

インストラクター補助

③ スマホやタブレット端末
(コントローラ端末)

トレーニング受講者



インストラクター

④ マネキン・人形等

■ ご用意頂くもの

- ① テレビ/液晶ディスプレイ
- ② HDMIケーブル
(電器店等で販売されています。)
- ③ スマホやタブレット端末
- ④ マネキン・人形等

* マネキン・人形等は他用途のものを適宜使用下さい


利用例4)座学時などにモニター画面をプロジェクター表示したい



■ご用意頂くもの

- ①スクリーン
- ②プロジェクタ
- ③HDMIケーブル
(電器店等で販売されています。)
- ④パソコン
- ⑤スマホやタブレット端末

利用例5) 搬送訓練などで利用(モバイルバッテリー利用)

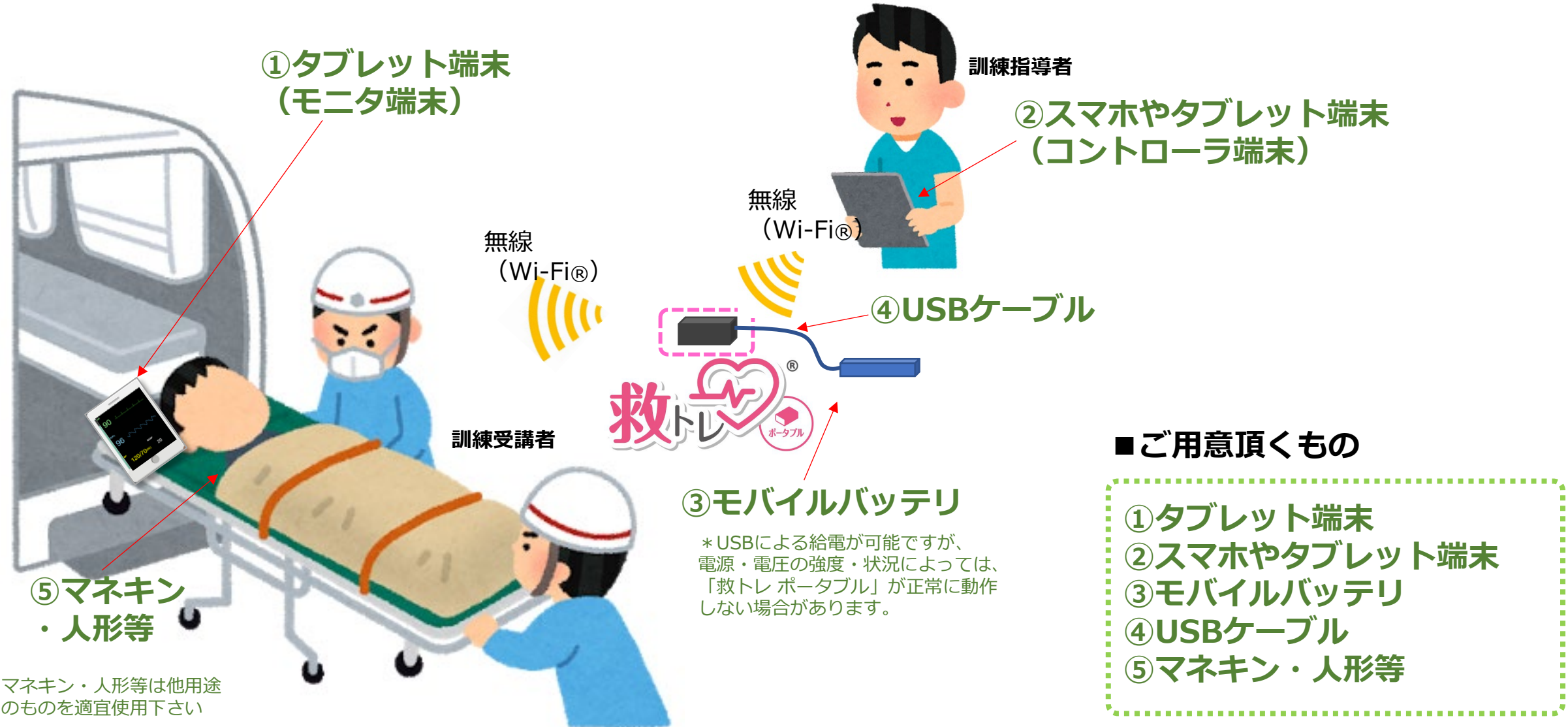

有線接続例) Ver.3.0.0以降は有線接続も可能です

モニター、コントローラーともに有線接続も可能です。もちろん無線・HDMI接続も引き続き利用可能です

パソコン
(LANポート有り)




LANケーブル



Ver.3.0.0以降

パソコン
(LANポート無し)

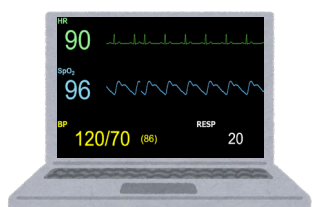

USB-Cアダプタ



LANケーブル



Ver.3.0.0以降

Android・新しい
iPad/iPhone
(USB-C)



USB-Cアダプタ



LANケーブル



Ver.3.0.0以降

Lightning(古い
iPad/iPhone)



Lightning
アダプタ




LANケーブル



Ver.3.0.0以降

モニターとコント
ローラー両方接続例

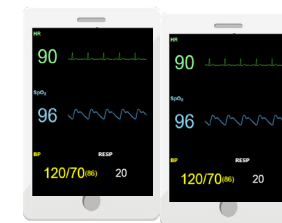

LAN分配器



LANケーブル



Ver.3.0.0以降